


blink® intensive PLUS^{TOP FRONT}

flydende øjengel / geelimäiset silmätipat

10ml

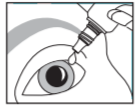

DA Langvarig lindring af vedvarende følelse af tørre, irriterede øjne

En mere tykflydende formulering kan give langvarig lindring af vedvarende følelse af tørre, irriterede øjne. Anbefales både til brug om dagen og om natten.

Indikationer

Irritation og ubehag i øjnene.

Kontraindikationer

Ingen kendte kontraindikationer.

Brugsanvisning

- Kom 1-2 dråber i det irriterede øje efter behov
- Blink flere gange for at skylle øjet
- Bruges så ofte som det er nødvendigt

Forsigtighedsregler

- Midlertidigt sløret syn kan forekomme straks efter brug af øjendråberne. Vent på at det forsvinder, før du fortsætter med aktiviteter, der kan være farlige at udføre med sløret syn
- Det anbefales at tage kontaktlinse ud før brug, og at de sættes i igen, når det midlertidigt slørede syn er forsvundet
- Må ikke bruges, hvis plomberingen er brudt eller mangler
- Væsken må ikke indtages
- Må ikke bruges, hvis du er allergisk over for et eller flere af indholdsstofferne
- Lad ikke flaskens spids røre ved nogen overflader, og undgå kontakt med øjet
- Må ikke bruges efter udløbsdatoen
- Opbevares utilgængeligt for børn
- Opbevares mellem 5-25 °C
- Kasser eventuelt ubrugt væske 45 dage efter åbning af flasken
- Potentielle risici, bivirkninger eller komplikationer, der generelt er forbundet med øjendråber: Allergisk reaktion, inflammation eller betændelse
- Må ikke bruges sammen med anden øjenmedicin uden at tale med øjenlægen først

Tal med øjenlægen, hvis du fortsat har problemer.

Bivirkninger

Ingen kendte bivirkninger.

Indeholder:

Polyethylenglycol 400 (PEG 400) – 0,25 %
OcuPure® konserveringsmiddel (natriumchlorid)
Natriumhyaluronat – 0,38 %
Borsyre
Natriumborat
Natriumchlorid
Kaliumchlorid
Calciumchlorid
Magnesiumchlorid
Renset vand

Symboler • Symbolit

Se brugsanvisningen Tutustu käyttöohjeisiin	Fremstillet Valmistaja	25°C Temperaturgrænse Lämpötilarajitus
STERILE A Steril. Aseptisk teknik Steriili. Aseptinen tekniikka	LOT Batchnummer Eräkoodi	5°C Kasser eventuelt ubrugt væske 45 dage efter åbning af flasken
Må ikke benyttes, hvis emballagen er beskadiget Älä käytä, jos pakkauksen on vaurioitunut	Anvendes inden Käytettävä ennen	45D Hävitä kaikki jäljellä oleva neste 45 päivän kuluttua siitä, kun pullo avattiin ensimmäisen kerran

CE 0123 **STERILE** A

AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus

Quarryvale, Co Dublin, Ireland

blink and OcuPure are trademarks of Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.

© Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2018

FI Lievittävät jatkuvasti kuivilta ja ärtyneiltä tuntuvien silmien ärsytystä pitkäkestoisesti

Paksumpi koostumus auttaa lievittämään jatkuvasti kuivilta ja ärtyneiltä tuntuvien silmien ärsytystä pitkäkestoisesti. Sopii käytettäväksi sekä päivällä että yöllä.

Käyttöaiheet

Ärtyneet, epämukavalta tuntuvat silmät.

Vasta-aiheet

Ei tunnettuja vasta-aiheita.

Käyttöohjeet

- Laita tarvittaessa 1–2 tippaa oikeilevaan silmään
- Rapytele muutaman kerran silmien huuhtomiseksi
- Käytä aina tarvittaessa

Varoimet

- Näkö voi sumeta tilapäisesti heti silmätippojen käytön jälkeen. Odota, kunnes näkökyky palautuu, ennen kuin jatkat toimia, joiden suorittaminen voi olla vaarallista huonontuneen näkökyvyn takia
- Piilolinssit on hyvä poistaa ennen käyttöä ja asettaa takaisin paikalleen, kun mahdollinen tilapäinen näön sumentuminen on hävinnyt
- Älä käytä, jos sinetti on murrettu tai se puuttuu
- **Luostia ei saa niellä**
- **Älä käytä, jos olet allerginen jollekin aineosalle**
- Tartunnan välttämiseksi älä koske pullon kärjellä mitään pintoja ja vältä koskettamista silmiä
- Älä käytä viimeisen käyttöpäivän jälkeen
- Ei lasten ulottuville
- Säilytä 5–25 °C:ssa
- Hävitä kaikki jäljellä oleva neste 45 päivän kuluttua siitä, kun pullo avattiin ensimmäisen kerran
- Silmätippoihin liittyviä mahdollisia riskejä, haittavaikutuksia tai komplikaatioita ovat seuraavat: allerginen reaktio, tulehdusreaktio tai infektiot
- Älä käytä yhdessä jonkin muun silmälääkkeen kanssa kysymättä ensin silmälääkäriä tai optikkoa

Jos ongelmat jatkuvat, ota yhteyttä silmälääkäriin tai optikkoon.

Haittavaikutukset

Ei tunnettuja haittavaikutuksia.


Sisältö:

Polyethylenglykoli 400 (PEG 400) – 0,25 %
OcuPure®-säilöntäaine (natriumkloriitti)
Natriumhyaluronatti – 0,38 %
Boorihappo
Natriumboraatti
Natriumkloridi
Kaliumkloridi
Kalsiumkloridi
Magnesiumkloridi
Puhdistettu vesi

blink® intensive PLUS^{TOP BACK}

flytende geløeyedråper / ögondroppar av flytande gel

10ml

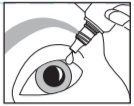

NO Langvarig lindring for øyne som stadig kjennes tørre og irriterte

En mer viskøs formulering som bidrar til å gi varig lindring for øyne som stadig kjennes tørre og irriterte. Anbefales for bruk både om dagen og om natten.

Indikationer

Ved iritasjon og ubehag i øynene.

Kontraindikasjoner

Ingen kjente.

Brugsanvisning

- Drypp 1 eller 2 dråper i det aktuelle øyet ved behov
- Blink flere ganger for å skylle øyet
- Brukes så ofte det er behov

Forholdsregler

- Det kan oppstå midlertidig tåkesyn umiddelbart etter bruk av øyedråper. Vent til synet klarer før du fortsetter med aktiviteter som kan være farlige så lenge du har tåkesyn
- Det anbefales å ta ut kontaktlinser før man bruker øyedråpene og at de settes inn igjen når synet har mangle
- Skal ikke brukes hvis forseglingen er brutt eller mangler
- Ikke svelg oppløsningen
- Skal ikke brukes hvis man er overfølsom for noen av ingrediensene
- Unngå forurensetning ved å passe på at spissen på flasken ikke kommer i kontakt med andre ting og unngå kontakt med øyene
- Skal ikke brukes etter utløpsdato
- Oppbevares utilgjengelig for barn
- Oppbevares mellom 5 °C og 25 °C
- Kast gjenværende oppløsning 45 dager etter at flasken ble åpnet
- Multig risiko, bivirkninger eller komplikasjoner generelt forbundet med øyedråper: Allergisk reaksjon, inflammasjonsreaksjon eller infeksjon
- Skal ikke brukes sammen med andre øyemedisiner uten først å rådspørre en øylege

Hvis du fortsatt har problemer, bør du ta disse opp med din øylege.

Bivirkninger

Ingen kjente.

Inneholder:

Polyethylenglykol 400 (PEG 400) – 0,25 %
OcuPure® konserveringsmiddel (natriumkloritt)
Natriumhyaluronat – 0,38 %
Borsyre
Natriumtetraaborat
Natriumklorid
Kaliumklorid
Kalsiumklorid
Magnesiumklorid
Sterilt vann

Symboler • Symboler

Les brugsanvisningen Se brugsanvisningen	Produsent Tilverkare	25°C Temperaturbegrensning Temperaturgräns
STERILE A Steril. Aseptisk teknik Steril. Aseptisk teknik	LOT Batch-kode Batchkod	5°C Kast gjenværende oppløsning 45 dager etter at flasken ble åpnet
Skal ikke brukes om emballasjen er skadet Använd inte om förpackningen är skadad	Brukes innen Används före	45D Kassera all överbliven vätska 45 dagar efter det att flaskan öppnats

AM70515RL12D

Revision Date: 05/2018

PAGE